

SecuFix Маточный манипулятор

Данные для заказа



Дух совершенства



Дух совершенства



SecuFix набор маточного манипулятора

состоит из: **SecuFix маточный манипулятор** (8370701), **SecuFix маточный зонд с градуированной шкалой** (8370702), **SecuFix Набор стерильных трубок для фиксации и вакуума** (набор из 10 шт, стерильные, 41708370), **щетка для чистки** (6.05), **щетка для чистки** (6.09), **запасные уплотнительные колпачки** (набор из 10 штук, 89.02) 83707011



SecuFix Кольпотрансиллюминатор, стерильный

(набор из 10 шт, отдельно, стерильно). Набор включает: Кольпотрансиллюминатор и вакуумная трубка (с обратным клапаном, аспирационным коннектором, Y-образным адаптером для использования с аспирационными инструментами со схожим соединением, аспирационная скоба), для однократного использования 41708370

Аксессуары



Маточный зонд 8365.00



Световод

Гибко-волоконный Ø 3.5 мм (маркировка оранжевого цвета), длина 2.3 м 806635231



Соединительная трубка


для механической очистки длина 600 мм 163915



RIWO System Tray

для стерилизации контейнер для инструментов с внутренними размерами 500 x 200 x 60 мм, стерилизуемых паром 38201.586

Безопасность в новом свете

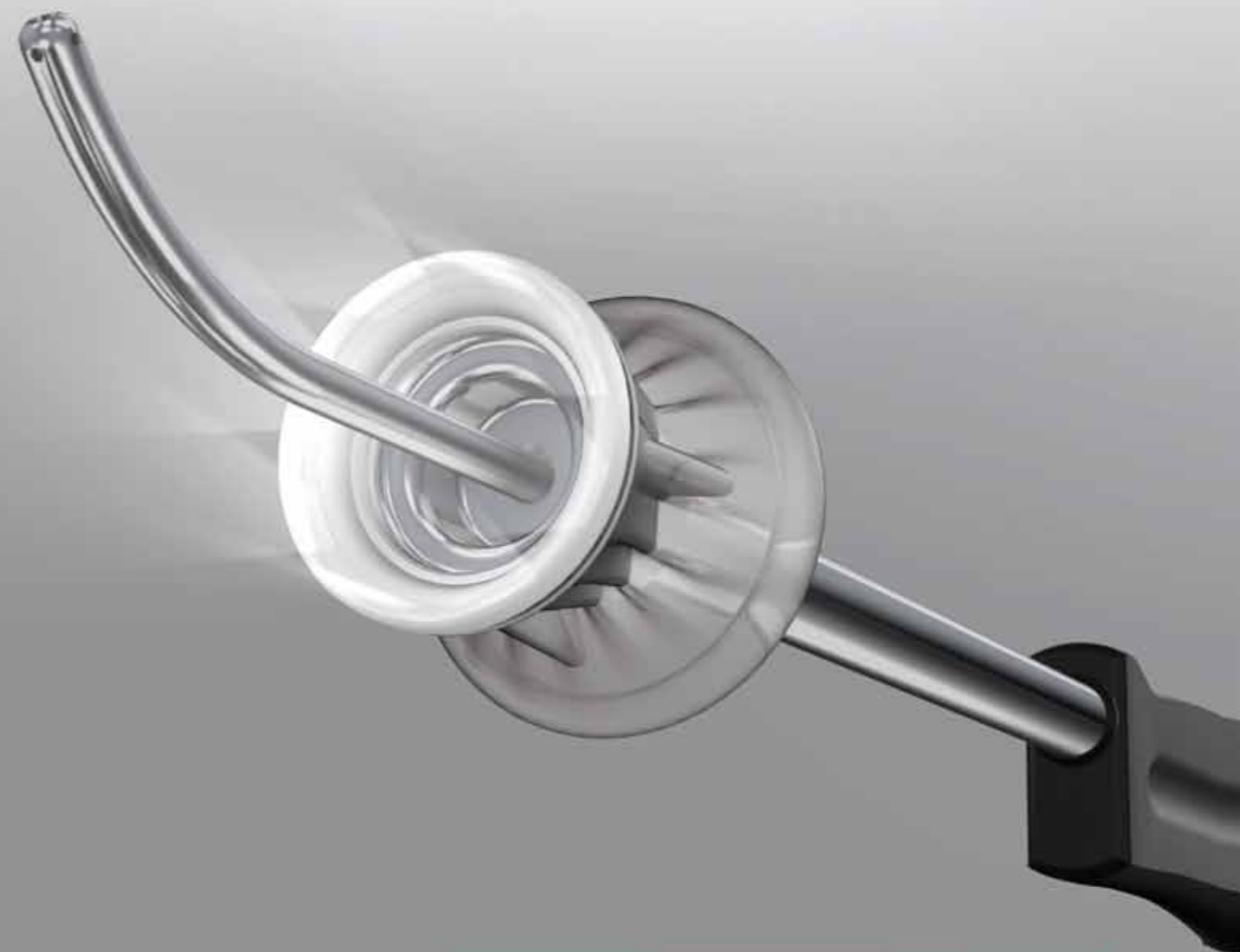

SecuFix Маточный манипулятор

Инновационная система с «кольпотрансиллюминацией» зоны резекции и вакуумной фиксации

Совершенствование методик малоинвазивной гистероэктомии на сегодняшний день позволяет использовать лапароскопическую гистероэктомию все чаще.

Новый маточный манипулятор SecuFix определяет новые стандарты безопасности. Атравматическая фиксация матки с использованием вакуумной аспирации и «кольпотрансиллюминации», (дистальное кольцевое освещение шейки матки) характеризуют новый маточный манипулятор, как продукт не имеющий аналогов.

Эти детали являются важными факторами для оптимального хирургического результата и позволяют соблюдать стандарты в онхирургии, не пропуская ткани вовлеченные в онкологический процесс.

Удобство в деталях

SecuFix имеет модульную конструкцию, состоящую всего из трех частей, что положительно скажется в вопросах эксплуатации и экономии.


- Маточный манипулятор
- Градуированный маточный зонд
- Колпотрансиллюминатор

«Кольпотрансиллюминатор» – идеальная операционная платформа


- Оптимальное разграничение шейки матки и влагалища
- Наилучшая визуализация свода

Стабильность означает контроль

Маточный манипулятор SecuFix надежный инструмент, который позволяет хирургу перемещать матку в любом направлении.

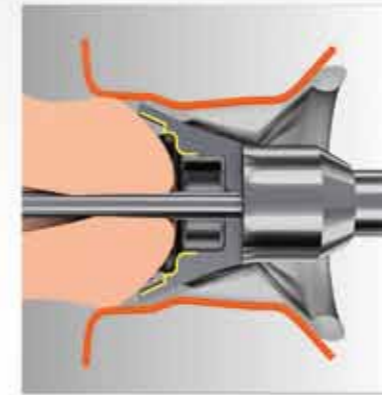

)) Универсальный размер

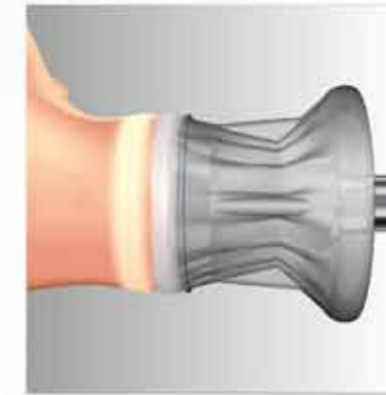

☀ «Кольпотрансиллюминатор»



☁ Вакуумная фиксация

Коническая форма купола насадки позволяет использовать манипулятор вне зависимости от особенностей размеров шейки и влагалища. Эластичная манжета создает условия для стабильного пневмоперитонеума.

Кольцевая подсветка позволяет оптимально визуализировать край резекции и в то же время дает возможность оценить в каком положении находится манипулятор во влагалище.

Аспирация в матке и шейке матки обеспечивает надежную атравматическую фиксацию. Это дает точную локализацию резецируемой ткани.



Градуированная шкала маточного зонда может быть адаптирована к различным длинам шейки матки с минимально возможной дилатацией шейки матки.